

YALEPIC[®] 病毒核酸样本保存管

YALEPIC[®] Viral Nucleic Acid Storage Tube

产品货号

YS21112

产品保存及运输条件

4 ~ 37°C 常温运输保存。

产品概述

YALEPIC[®] Viral Nucleic Acid Storage Tube 是一种保存拭子样本（咽拭子或鼻拭子）中收集到的病毒核酸的保存管。2 ml 口腔拭子DNA样本保存管中含有 1 ml 的保存液，通过将拭子与保存液充分混合，能迅速灭活病毒，抑制核酸酶，稳定核酸。可在常温条件下运输和储存样本，亦适应夏季高温的长途运输环境，能够长期稳定保存DNA长达一年，RNA样本3-5天。分离提取的核酸样本经验证可广泛适用于下游分析检测等领域。

产品组分

名称	规格
YALEPIC [®] 病毒核酸样本保存管	2 ml/支，50 支/盒


注意事项

1. 使用前检查产品包装是否完整，如有破损，严禁使用，并联系雅礼生物处理。
2. 本产品为一次性使用产品，请勿重复使用。
3. 采集样本后，可常温保存DNA长达一年，RNA样本3-5天，如需长期保存，请置于-80°C。

操作流程

1. 根据采样要求选择合适的采样拭子。
2. 清洁手部后，撕开采样拭子外包装。
3. 在相应部位采集样本，若为咽拭子，则应反复擦拭两侧扁桃体及咽后壁15~20次，若为鼻拭子则应触及鼻腔后壁，贴鼻腔旋转，并停留大于15s。
4. 打开样本保存管盖，将采样后的拭子放入样本采集管内，沿手柄上的折痕折断，随即盖上样本保存管，完成样品取样。

实验流程示意图

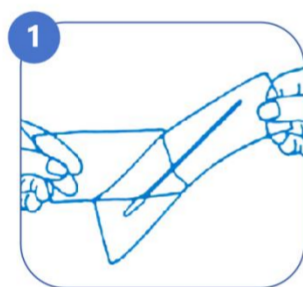

1
撕开包装，取出口腔拭子（操作过程中请勿接触到拭子棉签）



2
在采样部位反复刮取15~20次



3
拭子放于保存管中，沿折断点处折断拭子头部



4
拧紧保存管盖子，做好标记妥善保存。

本产品仅供研究使用，请勿用于临床诊断。