

势如闪电,唯快不破

组织/细胞RNA提取利器!

YALEPIC® 动物组织/细胞总RNA快速提取试剂盒 不含DNaseI

7min室温提取,安全无毒,双柱过滤法有效去gDNA


广谱适用性 使用YR23017对不同小鼠的不同组织,以及花甲、虾、鱼等组织进行RNA提取,并将产物进行琼脂糖凝胶电泳检测,结果表明YR23017具有广谱适用性。



YALEPIC® 细胞总RNA快速提取试剂盒 不含DNaseI

6min室温提取,安全无毒,高纯高产,适合大量样本

广谱适用性 使用YR23018对不同培养细胞进行RNA提取,并将产物进行琼脂糖凝胶电泳检测,结果表明YR23018具有广谱适用性。

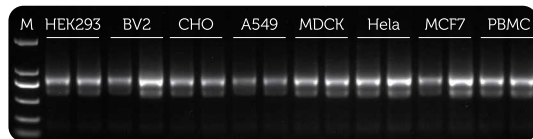



不同培养细胞RNA提取产物电泳图

	HEK293	BV2	CHO	A549	MDCK	Hela	MCF7	PBMC	
细胞投入量	4x10 ⁶	6x10 ⁶	6孔板单孔						4x10 ⁶
产量(μg)	58.5-64.3	15.7-16.6	38.9-39.2	19.7-20.3	22.4-24.0	26.1-26.8	18.2-18.9	3.6-4.9	

不同培养细胞样本投入量及RNA产量

优质提取效果

使用YR23018与竞品试剂盒A, B同时提取4x10⁶个HEK293细胞的总RNA, 琼脂糖凝胶电泳检测和浓度测定结果显示, YR23018提取的RNA产量高, 纯度和完整性好。

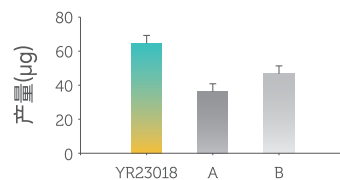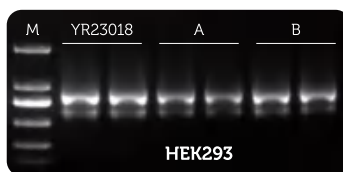

不同产品细胞RNA提取产量和完整性

产品信息

产品货号	产品名称	规格	目录价(元)
YR23017	YALEPIC®动物细胞/组织总RNA提取试剂盒(不含DNase I)	50T	800
YR23018	YALEPIC®细胞总RNA快速提取试剂盒(不含DNaseI)	50T	500



雅礼(江苏)生物科技有限公司

生产中心: 苏州市高新区金燕路8号阳山科技工业园9号楼四层
营销中心: 上海市闵行区浦江高科技园区

网址: www.yalibiotech.com
邮箱: info@yalibiotech.com

电话: 0512-66256010



多! 快! 好! 省! 万物可提

通用型基因组提取利器!

YALEPIC® 通用型基因组DNA提取试剂盒 不含RNase A

魔幻小红盒, 助您探索生命奥秘



样本适用性广, 可提取动物组织、细胞、血液、细菌、酵母等多种样本

产品优势





DNA产量高
完整性好, 纯度高



30min快速操作
安全无毒


组织基因组DNA提取

使用YC22016对不同小鼠的不同组织, 以及花甲、虾、鱼等组织进行基因组DNA提取, 并将产物进行琼脂糖凝胶电泳检测, 结果表明YC22016具有广谱适用性。

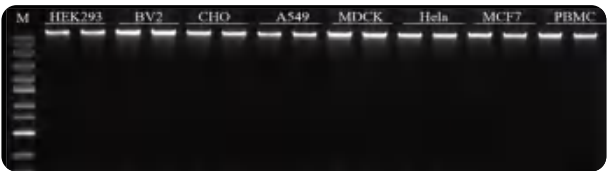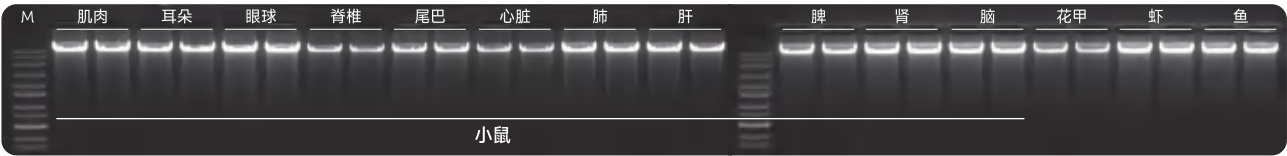


细胞基因组DNA提取

使用YC22016对不同培养细胞进行DNA提取, 并将产物进行琼脂糖凝胶电泳检测, 结果表明YC22016具有广谱适用性。

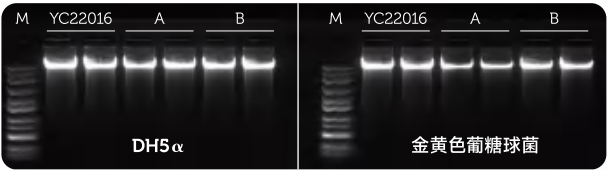

细菌基因组DNA提取

使用YC22016、A、B对革兰氏阴性菌及革兰氏阳性菌进行基因组DNA提取, 并将产物进行琼脂糖凝胶电泳检测, 结果表明YC22016具有广谱适用性。

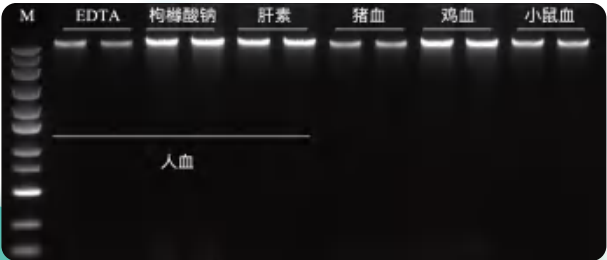

血液基因组DNA提取

使用YC22016对六种血液样本进行基因组DNA纯化: 三种200μl人抗凝血(分别含EDTA、肝素钠、枸橼酸钠抗凝剂)、200μl猪血(含枸橼酸钠抗凝剂)、20μl鸡血(含枸橼酸钠抗凝剂)以及200μl鼠血(含EDTA抗凝剂), 通过琼脂糖凝胶电泳检测提取产物, 结果显示YC22016样本兼容性好。

产品信息

产品货号	产品名称及货号	规格	目录价(元)
YC22016	YALEPIC® 通用型基因组DNA提取试剂盒 (不含RNase A)	50T	300